

Multi-Gyn® FLORAPLUS



PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU UPUTU ZA UPORABU I SAČUVAJTE JU KAO PODSJETNIK

Multi-Gyn FloraPlus

- Liječi i sprječava probleme rodnice uzrokovane kvasnicama
- Pruža prebiotičku podršku zdravoj flori rodnice
- Sprječava (ponavljajuću) kandidijazu
- Prebiotički potičaj rasti laktobacila
- Djeluje protiv štetnih mikroorganizama bez rizika od rezistencije (otpornosti)
- Optimira pH vrijednost rodnice (kiselost)
- Bioaktivan je, siguran i prirodan

Kako djeluje Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn FloraPlus je prirodan proizvod koji se temelji na patentiranom bioaktivnom 2QR-kompleksu u kombinaciji s prebiotičkim sastojcima. Prebiotici su hranjivi sastojci u FloraPlus koji podržavaju rast dobrih i korisnih laktobacila. Multi-Gyn FloraPlus optimira floru i pH vrijednost rodnice.

2QR-kompleks je prirodna tvar koja potječe od biljaka i sastoji se od bioaktivnih polisaharida. Ima jedinstvenu sposobnost blokiranja adhezije (lijepljenja) štetnih bakterija i na taj način, prirodnim putem učinkovito neutralizira ove bakterije... Prirodan učinak blokiranja je učinak prebiotika, je siguran i bezopasan jer se ne temelji na toksičnim tvarima ili jakim kemikalijama. Nema poznatih štetnih događaja. Ova jedinstvena kombinacija čini Multi-Gyn FloraPlus idealnim proizvodom za zdravu rodnicu.

Multi-Gyn FloraPlus održava ravnotežu flore u rodnici tako što suzbija štetne mikrobe i podržava razvoj korisnih laktobacila (bakterije mliječne kiseline).

Multi-Gyn FloraPlus tako stvara optimalnu i prirodnu floru koja sprječava tegobe povezane s prekomjernim rastom nepoželjnih mikroorganizama kao što je kandida. Zato je FloraPlus vrlo učinkovita u sprječavanju (ponavljajućih) problema rodnice. Učinkovito ublažava tegobe poput iscjeka, svrbeža, nadražnost, neugodnog mirisa, crvenila i osjetljivosti.

Multi-Gyn FloraPlus nije lijek antimikotik, već je zbog svojeg jedinstvenog načina djelovanja klasificiran kao medicinski proizvod.

Indikacije

- svrbež, nadražnost, neugodan miris i iscjedak (uzrokovani promijenjenom florom rodnice)
- poremećena/neuravnotežena flora rodnice zbog mijesečnice, spolne aktivnosti, plivanja, uzimanja anti-biotika, zdravstvenih problema i dr.
- (ponavljajući) problemi povezani s kvasnicama (kandidijaza)

Ne liječi ili sprječava spolno prenosive bolesti.


Djelatni sastojci:

Krosopolimer galaktosarabinana i poliglukuronske kiseline*, prebiotici *2QR - kompleks: patentirani bioaktivni polisaharidi. www.2QR.com

Multi-Gyn Flora Plus je prirodan proizvod koji se temelji na bioaktivnom 2QR - kompleksu u kombinaciji s prebiotičkim koji uspostavljaju i obnavljaju floru rodnice. Jedinstveni sastav ne sadrži hormone, sastojke životinjskog podrijetla, jake kemikalije ili mirise, te je siguran i neškodljiv.


Primjena

Multi-Gyn FloraPlus je prebiotički gel za rodnicu kojeg treba primijeniti u rodnicu. Jedan jednodozni aplikator je za jednu primjenu. Prebiotički gel za rodnicu primjenjuje se izravno u rodnicu s pomoću posebno oblikovanog aplikatora. Nakon uporabe bacite jednodozni aplikator. Pogledajte uputu za uporabu jednodoznog aplikatora na crtežima u nastavku.

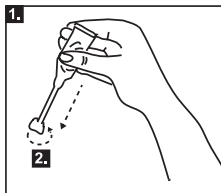


1. Protresite sadržaj jednodoznog aplikatora okretanjem.


2. Otvorite jednodozni aplikator odvajanjem vrha tako da ga savinete.

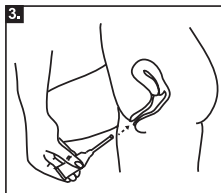

3. Nježno stavite tanki dio jednodoznog aplikatora u rodnicu.

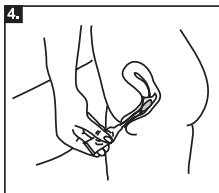

4. Nježno stisnite jednodozni aplikator za primjenu gela u rodnicu

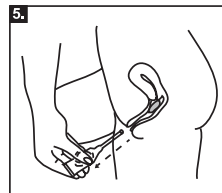

4. Nastavite stiskati jednodozni aplikator dok ga vadite iz rodnice..

Napomena: Jednodozni aplikator je dizajniran za primjenu preporučene količine gela. Kada se primjenjuje prema uputi, mala količina gela ostaje u jednodoznom aplikatoru.

Uputa za uporabu

• Za liječenje problema rodnice uzrokovanih kvasnicama :

primijenite 1 jednodozni aplikator neposredno prije odlaska na spavanje, tijekom 5 uzastopnih dana.

• Za izravno ublažavanje svrbeža, nadražnosti, neugodnog mirisa i iscjeka iz rodnice:

primijenite 1 jednodozni aplikator kad god je potrebno ublažavanje tih simptoma

• Za sprječavanje problema rodnice (kao što su ponavljajuće infekcije kvasnicama)

kao podrška dobrim laktobacilima, te kao zaštita od problema rodnice:

primijenite 1 jednodozni aplikator svaka 3 dana.

Multi-Gyn FloraPlus ne smije se primjenjivati dulje od 30 uzastopnih dan, to omogućuje da se flora rodnice regulira sama i bez podrške. U slučaju trajnih ili ponavljajućih tegoba, uvijek se trebale obratiti liječniku.

Napomena!

Kao djelatni proizvod, Multi-Gyn Flora Plus može stvoriti osjećaj topline i peckanja nakon primjene. To je sasvim normalno i nestati će nakon nekoliko minuta.

Štetni događaji

Nema poznatih štetnih događaja. Budući Multi-Gyn FloraPlus ima optimalnu kiselost (nizak pH) za rodnicu, a sperma je lužnata (visoki pH), primjenom Multi-Gyn FloraPlus može se smanjiti aktivnost spermija. Stoga ne preporučujemo primjenu Multi-Gyn FloraPlus tijekom razdoblja ovulacije kada pokušavate zatrudnjeti. Multi-Gyn FloraPlus se ne bi trebao koristiti prije i nakon spolnog odnosa ako želite zatrudnjeti. Multi-Gyn FloraPlus nije kontraceptiv.

Ako ste vrlo osjetljivi na alergije, možete staviti malo gela na unutrašnju stranu podlaktice. Ako se pojavi crvena točkica koja svrbi, savjetujemo ne primijeniti Multi-Gyn FloraPlus.

Primjena s lijekovima

Nije poznat utjecaj Multi-Gyn FloraPlus na lijekove.

Trudnoća i dojenje

Nema poznatih kontraindikacija za primjenu Multi-Gyn FloraPlusa tijekom trudnoće i dojenja.

Čuvanje

Savjetuje se čuvati Multi-Gyn FloraPlus na temperaturi između 10°C i 25°C (sobna temperatura). Multi-Gyn FloraPlus čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Nemojte primijeniti Multi-Gyn FloraPlus nakon isteka roka valjanosti.

Boja gela

Boja bioaktivnog gela može blago varirati, od bezbojne do svijetlo jantarne. To je povezano s glavnom djelatnom tvari, 2QR - kompleksom, koji je u potpunosti prirodan i stoga može blago varirati u boji. To ne utječe na djelotvornost ili sigurnost proizvoda.

Dodatne informacije

U rodnici, korisne bakterije poznate kao laktobacili, drže većinu neželjenih bakterija i drugih mikroorganizama pod kontrolom. Poremećaj ove ravnoteže često se opaža kao promijenjeni iscjedak iz rodnice. Najčešći su prekomjerni rast bakterija poznat kao bakterijska vaginoza (BV) i problemi uzrokovani kvasnicama u rodnici (kandidijaza). Bakterijsku vaginozu najčešće prati miris po ribi a probleme uzrokovane kvasnicama prati svrbež, osjećaj peckanja i debeli bijeli iscjedak.

WWW.MULTI-GYN.COM



0482

03-2012
BC1801.5

Proizvođač:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Nizozemska